



Министерство здравоохранения  
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

**РУКОВОДИТЕЛЬ**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109012  
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74  
www.roszdravnadzor.gov.ru

*28.02.2023 № 014-99/23*

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**О безопасности  
медицинских изделий**



2552359

Субъектам обращения  
медицинских изделий

Руководителям  
территориальных  
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления  
здравоохранением субъектов  
Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в рамках исполнения государственной функции по мониторингу безопасности медицинских изделий, находящихся в обращении на территории Российской Федерации, доводит до сведения субъектов обращения медицинского изделия письмо ООО «ФИЛИПС», уполномоченного представителя производителя, о новых данных по безопасности при применении медицинского изделия «Система магнитно-резонансной томографии Ingenia Elition с принадлежностями», регистрационное удостоверение от 28.02.2022 № РЗН 2019/8690, срок действия не ограничен.

В случае необходимости получения дополнительной информации обращаться в ООО «ФИЛИПС» (123022, Россия, г. Москва, ул. Сергея Макеева, д. 13, тел.: +7 (495) 937-93-00, факс: +7 (495) 937-93-07).

Приложение: на 9 л. в 1 экз.

А.В. Самойлова

# PHILIPS

Приложение 1

## **СРОЧНОЕ уведомление о безопасности**

Система магнитно-резонансной томографии Ingenia Elition с принадлежностями

Градиентная катушка может действовать как источник тепла, что потенциально может привести к задымлению и/или возгоранию.

22 ноября 2022 года

**Данный документ относится к двум группам лиц:**

- Если серийный номер вашего устройства указан в Приложении А: пожалуйста, немедленно прекратите использование затронутой МРТ-системы (см. также раздел 4 «Действия, которые должен предпринять пользователь»).
- Если серийный номер вашего устройства указан в Приложении В: это письмо содержит важную информацию для дальнейшего безопасного и надлежащего использования вашего оборудования (см. также раздел 4 «Действия, которые должен предпринять пользователь»).

Ознакомьтесь со следующей информацией вместе со всеми сотрудниками, которым необходимо знать содержание данного сообщения. Важно понимать смысл этого сообщения.

Уважаемый пользователь!

Компания Philips обнаружила проблему с некоторыми своими 3Т (мощностью 3 Тл) МРТ-системами, МР-системами Ingenia Elition, которая может представлять риск для пациентов и/или пользователей. Данное **СРОЧНОЕ уведомление о безопасности** предназначено для того, чтобы проинформировать вас о следующем:

### **1. В чем заключается проблема, и при каких обстоятельствах она может возникнуть**

Компания Philips выявила проблему, при которой неполадки определенного компонента в градиентной катушке затронутых 3Т МРТ-систем, указанных в этом письме, могут привести к появлению источника тепла, потенциально способного вызвать образование дыма и/или возгорание.

При неполадках компонента пользователь может наблюдать следующее:

- серьезные проблемы с качеством изображения (артефакты изображения, вызванные электрическими помехами);

# PHILIPS

- задымление и/или возгорание.

Компания Philips получила 2 (две) жалобы на возгорание, связанное с МРТ-системой Ingenia Elition. В обоих случаях не было зарегистрировано причинения вреда здоровью или серьезного вреда, однако имел место ущерб имуществу.

## 2. Потенциальная опасность / вред, связанные с данной проблемой

При возникновении дыма или возгорании потенциальный риск для пациентов или операторов может включать вдыхание дыма, ожоги и/или асфиксию, которые в свою очередь потенциально могут привести к причинению вреда здоровью или даже смерти. Эта проблема также потенциально может привести к повреждению имущества.

## 3. Затрагиваемые продукты и способы их идентификации



### Целевое назначение:

Магнитно-резонансные (МРТ) системы Philips — это медицинские электрические системы, предназначенные для использования в качестве диагностического устройства.

Такая МРТ-система позволяет обученным врачам получать изображения в поперечном сечении, спектроскопические изображения и/или спектры внутренней структуры головы, тела или конечностей в любой ориентации, представляющие пространственное распределение протонов или других ядер со спином.

### Идентификация затронутых систем:

Затронутые 3Т МРТ-системы, включая номер, название и серийный номер продукта, перечислены в Приложении А и/или Приложении В. На Рисунке 1 показано расположение номера, названия и серийного номера продукта.

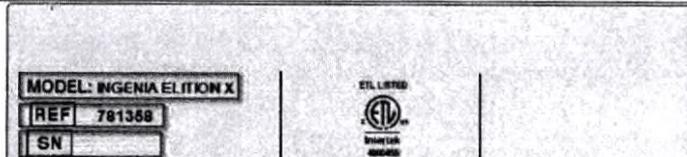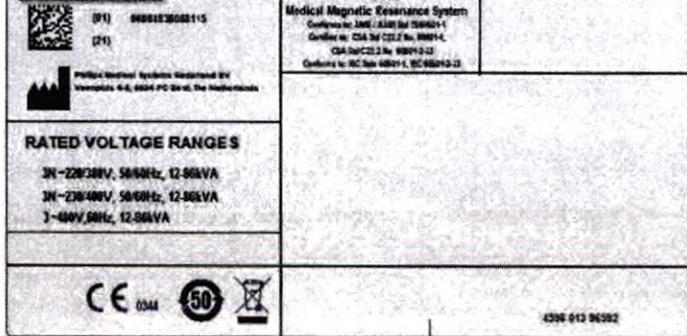
Рисунок 1. Пример этикетки системы	Название продукта	Модель
 <p>MODEL: INGENIA ELITION X REF: 781358 SN: [REDACTED]</p>	Ingenia Elition X	781358 782107 782119 782136
 <p>RATED VOLTAGE RANGES 3N-220/380V, 50/60Hz, 12-00kVA 3N-270/400V, 50/60Hz, 12-00kVA 3-400V, 0Hz, 12-00kVA</p>	Ingenia Elition S	781357 782106 782137

# PHILIPS

Найдите серийный номер затронутой МРТ-системы:

1. Зайдите в техническое помещение
2. Найдите CombiCabinet
3. На передней дверце LCC системы найдите этикетку системы (см. рис. 2)


*Рисунок 2: Передняя дверца LCC*

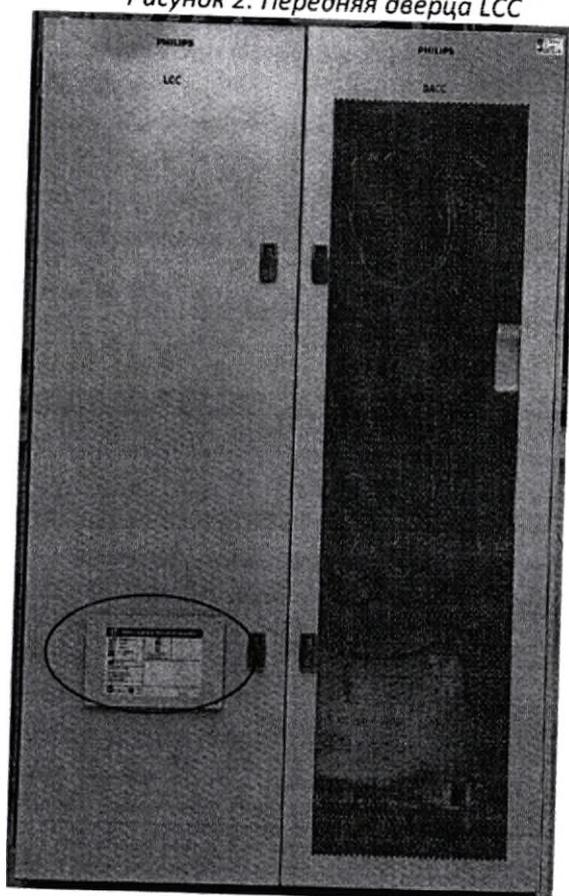

4. Найдите серийный номер на этикетке системы (см. рисунок 3)

# PHILIPS

Рисунок 3: этикетка системы

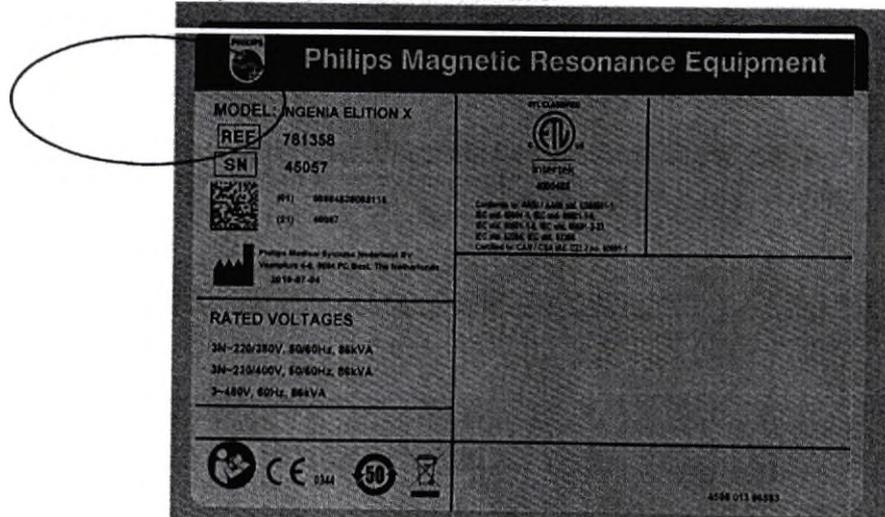

## 5. Действия, которые должны быть предприняты пользователем для предотвращения рисков для пациентов или пользователей

1. Системы, в которых еще не установлена функция блокировки, подключенная к детектору дыма, указаны в **Приложении А**. Если ваша система указана в **Приложении А**, **немедленно прекратите использование соответствующей МРТ-системы (систем) до тех пор, пока компания Philips не установит блокировку, подключенную к детектору дыма.**
  - Разместите уведомление о запрете на использование на затронутой МРТ-системе (системах) или рядом с ней (ними).
  - Разместите данное уведомление рядом с затронутой МРТ-системой (системами) для удобства.
  - Распространите это уведомление среди всех пользователей данного устройства, чтобы они знали о проблеме с продуктом и связанной с ней потенциальной опасности/вреде до устранения проблемы.
  - Просим заполнить и вернуть приложенную форму обратной связи с пользователем в компанию Philips в **кратчайшие сроки** и не позднее 30 дней с момента получения данного письма.
  - **Примечание.** После установки блокировки, подключенной к детектору дыма, следуйте инструкциям, приведенным в пунктах 2–5.
2. Компания Philips установила функцию блокировки, подключенной к детектору дыма, на системах, перечисленных в **Приложении В**.

# PHILIPS

**Немедленно подтвердите, установлена ли в вашей системе блокировка, подключенная к детектору дыма, проверив серийный номер, указанный в Приложении В.**

- Разместите данное уведомление рядом с затронутой МРТ-системой (системами) для удобства.
  - Распространите это уведомление среди всех пользователей данного устройства, чтобы они знали о проблеме с продуктом и связанной с ней потенциальной опасности/вреде до устранения проблемы.
  - Просим заполнить и вернуть приложенную форму обратной связи с пользователем в компанию Philips **в кратчайшие сроки** и не позднее 30 дней с момента получения данного письма.
3. Функция блокировки, подключенная к детектору дыма, интегрирована с МРТ-системой и отключает питание соответствующей части системы (усилитель градиента) при обнаружении дыма, чтобы предотвратить дальнейшее развитие задымления и/или возгорания. Если система блокировки, подключенная к детектору дыма, обнаружила задымление и выключила усилитель градиента:
- Уберите пациента из системы в соответствии с инструкциями по эксплуатации, поскольку питание деки стола по-прежнему будет активным
  - Немедленно проинформируйте сервисный центр компании Philips
4. Если пользователь столкнулся с задымлением, возгоранием или серьезными проблемами с качеством изображения:
- Немедленно прекратите сканирование и уберите пациента из системы
  - Выключите питание всей системы
  - Снимите магнитное поле с помощью кнопки аварийного отключения магнита (Emergency Magnet Off, ЕМО)
  - Соблюдайте правила пожарной безопасности установленные в месте эксплуатации (например, эвакуация, информирование пожарных)
  - Немедленно проинформируйте сервисный центр компании Philips
5. Убедитесь, что все пользователи ознакомлены с процедурами действий в чрезвычайных ситуациях, принятыми в учреждении, как указано в разделе 2 «Безопасность инструкции по применению»:

### **Экстренные процедуры**

*Пользователь должен установить порядок действий в чрезвычайных ситуациях для следующих случаев:*

- *Экстренная медицинская ситуация*
- *Пожар*
- *Экстренная ситуация, требующая немедленного снятия магнитного поля*

# PHILIPS

- *Выброс газа гелия в смотровую комнату*  
*На случай возникновения чрезвычайной ситуации при перемещении деки стола системы Philips MPT имеют кнопку аварийной остановки стола.*

## **6. Действия, запланированные Philips для устранения проблемы**

Компания Philips предоставляет пользователю данное письмо, содержащее рекомендации, до завершения расследования по этому вопросу.

Если ваша система еще не оснащена блокировкой, подключенной к детектору дыма, компания Philips свяжется с вами, чтобы запланировать установку (см. FCO78100529).

Компания Philips стремится решить эту проблему и продолжает расследовать ее. Мы будем регулярно сообщать вам о развитии нашего плана по решению проблемы. Первое обновление будет предоставлено не позднее 20 января 2023 г.

Заверяем вас, что поддержание высокого уровня безопасности и качества является нашим главным приоритетом. Если вам нужна дополнительная информация или поддержка относительно данной проблемы, пожалуйста, обратитесь в местное представительство Philips: ООО «ФИЛИПС», Отдел сервиса медицинских систем, г. Москва, ул. Сергея Макеева, 13. Телефон бесплатной горячей линии - 8-800-200-0881 (Дмитрий Соколов).

Настоящее уведомление было доведено до сведения соответствующих регулирующих органов.

Компания Philips сожалеет о любых неудобствах, вызванных этой проблемой.

С уважением,

Дэвид Хэнли

Руководитель отдела качества магнитно-резонансной томографии (МРТ)

# PHILIPS

Устройства, затронутые этой проблемой — таблица 6:

Amara View	
Номер детали	Описание
1090602	S Amara View Mask w/HGR
1090603	M Amara View Mask w/HGR
1090604	L Amara View Mask w/HGR
1090622	S Amara View Mask w/ HGR, DOM
1090623	M Amara View Mask w/ HGR, DOM
1090624	L Amara View Mask w/ HGR, DOM
1090641	XS Amara View Mask w/HGR, JPN
1090642	S Amara View Mask w/HGR, JPN
1090643	M Amara View Mask w/HGR, JPN
1090644	L Amara View Mask w/HGR, JPN
1090651	XS Amara View Mask SE w/HGR, JPN
1090652	S Amara View Mask SE w/HGR, JPN
1090653	M Amara View Mask SE w/HGR, JPN
1090654	L Amara View Mask SE w/HGR, JPN
1090662	S Amara View Mask w/HGR, INTL
1090663	M Amara View Mask w/HGR, INTL
1090664	L Amara View Mask w/HGR, INTL
1090670	Amara View Mask w/HGR, FitPack
1090696	RP – Amara View Headgear, L
1090697	RP-Amara View Headgear, Standard
1135080	S AMARA VIEW MASK SE W/ HGR
1135081	M AMARA VIEW MASK SE W/ HGR
1135082	L AMARA VIEW MASK SE W/ HGR
1136626	Amara View Magnet Clip
1090670RTL	AMARA VIEW MASK W/HGR, FITPACK-RTL
1136626RTL	Amara View Full Face Magnetic Clips

DreamWear	
Номер детали	Описание
1133344	S, DreamWear UTN Nsl/Full, Combo Pack
1133345	M, DreamWear UTN Nsl/Full, Combo Pack
1133370	S, DreamWear Full, Sm & Med Frm, INTL
1133371	M, DreamWear Full, Sm & Med Frm, INTL
1133372	L, DreamWear Full, Sm & Med Frm, INTL
1133373	MW, DreamWear Full, Sm & Med Frm
1133375	S, DreamWear Full, Sm & Med Frm, GBL

Wisp	
Номер детали	Описание
1094050	WISP MASK, CLEAR FRAME, W/ HDGR, DOM
1094051	WISP MASK, FABRIC FRAME, W/MAG CLIPS DOM
1094053	WISP MASK, USA, FABRIC FRAME, W/ HDGR
1094060	WISP MASK, CLEAR FRAME, W/ HDGR, INTL
1094061	WISP MASK, FABRIC FRAME, W/ HDGR, INTL
1094062	WISP MASK, CLEAR FRAME, W/ HDGR, INTL SE
1094070	WISP MASK, CLEAR FRAME, W/ HDGR, JPN SE
1094071	P, WISP MASK, FABRIC FRAME, W/ HDGR, JPN
1094072	S/M, WISP MASK FABRIC FRAME, W/ HDGR JPN
1094073	L, WISP MASK, FABRIC FRAME, W/ HDGR, JPN
1113954	XL, Wisp Mask, Fabric Frame, w/ HDGR, JP
1117119	MW, Wisp Mask, Fabric Frame, w/ HDGR, JP
1118060	P, WISP MASK, CLEAR FRAME, W/ HDGR, DOM
1118061	S/M, WISP MASK CLEAR FRAME, W/ HDGR DOM
1118062	L, WISP MASK, CLEAR FRAME, W/ HDGR, DOM
1118063	XL, WISP MASK, CLEAR FRAME, W/ HGR, DOM
1118064	P, WISP MASK, FABRIC FRAME, W/ HDGR,DOM
1118065	S/M, WISP MASK FABRIC FRAME W/ HDGR,DOM
1118066	L, WISP MASK, FABRIC FRAME, W/ HDGR,DOM
1118067	XL, WISP MASK, FABRIC FRAME W/ HGR, DOM
1120434	Wisp/DreamWisp Magnetic Headgear Clip,RP
1137360	Wisp Nasal Lab Mask, Fabric Frame, DOM
1137361	Wisp Nasal Lab Mask, Clear Frame, DOM
1137366	S/M, Wisp Lab Mask, Fabric Frame, DOM
1137367	L, Wisp Nasal Mask, Fabric Frame, DOM
1137368	S/M, Wisp Nasal Mask, Clear Frame, DOM
1137369	L, Wisp Nasal Mask, Clear Frame, DOM
1137370	COMBOPACK, WISP LAB MASK ,DOM
1138989	P, WISP MASK,CLEAR FRAME, W/HDGR,1118060
1138991	L, WISP MASK, CLEAR W/ HDGR, DOM 1118062
1138992	XL,WISP MASK,CLEAR FRAME,W/ HGR,1118063
1138993	P, WISP MASK,FABRIC FRAME,W/HDGR,1118064
1138994	S/M,WISP MASK FABRICFRAME W/HDGR,1118065
1138995	L, WISP MASK,FABRIC FRAME,W/HDGR,1118066
1138996	XL,WISP MASK,FABRIC FRAME W/HGR, 1118067
1139009	S/M,WISPMASK CLEAR FRAME,W/ HDGR 1118061

# PHILIPS

1133376	M, DreamWear Full, Sm & Med Frm, GBL
1133377	L, DreamWear Full, Sm & Med Frm, GBL
1133378	MW, DreamWear Full, S. & M. Frm, GBL
1133380	S, DreamWear Full, M. Frm W/ HGR, GBL
1133381	M, DreamWear Full, Med Frm W/ HGR
1133382	L, DreamWear Full, Med Frm W/ HGR
1133383	MW, DreamWear Full, Med Frm W/ HGR
1133385	S, DreamWear Full, Sm Frm W/ HGR, GBL
1133386	M, DreamWear Full, Sm Frm W/ HGR
1133387	L, DreamWear Full, Sm Frm W/ HGR, GBL
1133388	MW, DreamWear Full, Sm Frm W/ HGR,
1133390	S, DreamWear Full, Lg Frm W/ HGR, GBL
1133391	M, DreamWear Full, Lg Frm W/ HGR, GBL
1133392	L, DreamWear Full, Lg Frm W/ HGR, GBL
1133393	MW, DreamWear Full, Lg Frm W/ HGR
1133395	DreamWear Full, Demo Pack
1133400	FitPack, DreamWear Full, Med Frame
1133401	DreamWear Full, Med Frm W/O HGR, GBL
1133405	S, DreamWear Full, Med Frm W/O HGR
1133406	M, DreamWear Full, Med Frm W/O HGR
1133407	L, DreamWear Full, Med Frm W/O HGR
1133408	MW, DreamWear Full, Med Frm W/O
1133410	S, DreamWear Full, Sm Frm W/O HGR
1133411	M, DreamWear Full, Sm Frm W/O HGR
1133412	L, DreamWear Full, Sm Frm W/O HGR
1133413	MW, DreamWear Full, Sm Frm W/O HGR
1133415	S, DreamWear Full, Lg Frm W/O HGR, GBL
1133416	M, DreamWear Full, Lg Frm W/O HGR
1133417	L, DreamWear Full, Lg Frm W/O HGR, GBL
1133418	MW, DreamWear Full, Lg Frm W/O HGR
1133423	S/M, DreamWear Full, Sm Frm w/ HGR
1133424	S/M, DreamWear Full, Med Frm w/ HGR
1133425	S/M, DreamWear Full, Lg Frm w/ HGR
1133427	W, DreamWear Full, Med Frm W/ HGR
1133430	S, DreamWear Full Cushion, RP
1133431	M, DreamWear Full Cushion, RP
1133432	L, DreamWear Full Cushion, RP
1133433	MW, DreamWear Full Cushion, RP
1133434	SW, DreamWear Full Cushion, RP
1133435	S, DreamWear Full Cushion, RP, JPN
1133436	M, DreamWear Full Cushion, RP, JPN

1094051RTL	WISP MASK, FABRICFRM,W/MAG CLIPS DOM-RTL
1148366	DreamWisp/Wisp Magnetic Clips - RTL

DreamWisp	
Номер детали	Описание
1137916	Fitpk DreamWisp Nsl, MED Con W/HGR GBL
1137918	FitPk DreamWisp Nsl, MED Con W/O HGR GBL
1137921	FitPk, DreamWisp Nsl, MED Con W/ HGR INT
1137922	P, DreamWisp Nsl, Med Con W/O HGR GBL
1137923	S, DreamWisp Nsl, Med Con W/O HGR GBL
1137924	M, DreamWisp Nsl, Med Conn W/O HGR GBL
1137925	L, DreamWisp Nsl, Med Con W/O HGR GBL
1137926	XL, DreamWisp Nsl, Med Con W/O HGR GBL
1137927	P, DreamWisp NSL, SM CON, W/HGR, GBL
1137928	S, DreamWisp NSL, SM CON, W/HGR, GBL
1137929	M, DreamWisp NSL, SM CON, W/HGR, GBL
1137930	L, DreamWisp NSL, SM CON, W/HGR, GBL
1137931	XL, DreamWisp NSL, SM CON, W/HGR, GBL
1137932	P, DreamWisp Nsl, Med Con, W/HGR, GBL
1137933	S, DreamWisp Nsl, Med Con, W/HGR, GBL
1137934	M, DreamWisp Nsl, Med Con, W/HGR, GBL
1137935	L, DreamWisp Nsl, Med Con, W/HGR, GBL
1137936	XL, DreamWisp Nsl, Med Con, W/HGR, GBL
1137937	P, DreamWisp NSL, SM CON, W/HGR, INT
1137938	S, DreamWisp NSL, SM CON, W/HGR, INT
1137939	M, DreamWisp NSL, SM CON, W/HGR, INT
1137940	L, DreamWisp NSL, SM CON, W/HGR, INT
1137941	XL, DreamWisp NSL, SM CON, W/HGR, INT
1137942	P, DreamWisp Nsl, Med Con, W/HGR INT
1137943	S, DreamWisp Nsl, Med Con, W/HGR INT
1137944	M, DreamWisp Nsl, Med Con, W/HGR INT
1137945	L, DreamWisp Nsl, Med Con, W/HGR INT
1137946	XL, DreamWisp Nsl, Med Con, W/HGR INT
1137947	P, DreamWisp Nsl, S-M-L Con, W/HGR, JPN
1137948	S, DreamWisp Nsl, S-M-L Con, W/HGR, JPN
1137949	M, DreamWisp Nsl, S-M-L Con, W/HGR, JPN
1137950	L, DreamWisp Nsl, S-M-L Con, W/HGR, JPN
1137951	XL, DreamWisp Nsl, S-M-L Con, W/HGR, JPN
1137953	LABPK DreamWisp ALL CON S/M/L CUSH W/HGR
1137954	P/XL LABPK DreamWisp LAB PACK, S/L con

# PHILIPS

1133438	W, DreamWear Full Cushion, RP, JPN
1133450	DreamWear Full Headgear, RP
1133454	Headgear Magnet Clip, RP
1135275	S, DreamWear Full, Sm and Med Frm
1135276	M, DreamWear Full, Sm and Med Frm
1135277	SW, DreamWear Full, Sm and Med Frm
1135278	MW, DreamWear Full, Sm and Med Frm
1135327	S, DreamWear Full, Sm & Med Frm, KR
1135388	M, DreamWear Full, Sm & Med Frm, KR
1135389	SW, DreamWear Full, Sm & Med Frm, KR
1135390	MW, DreamWear Full, Sm & Med Frm
1137430	Fitpack, DreamWear Full Lab, Med Frm
1137431	Ext Sizepack, DreamWear Full Lab Msk
1137437	S, DreamWear Full Lab Msk, Med Frame
1137438	S, DreamWear Full Lab Mask, Sm Frame
1137439	M, DreamWear Full Lab Msk, Med Frame
1137440	COMBOPACK, DREAMWEAR FULL LAB
1140235	S, DreamWear Full, Med Frm W/ HGR
1143130	FitPack, DreamWear Full, Med Frame
1144347	DreamWear Full Headgear - Lab, RP
1146593	S, DreamWear Full Cushion, RP - RTL
1146594	M, DreamWear Full Cushion, RP - RTL
1146595	L, DreamWear Full Cushion, RP - RTL
1146596	MW, DreamWear Full Cushion, RP - RTL
1146597	DreamWear Full Headgear, RP - RTL
1148363	DreamWear Full Face Magnet Clip - RTL
1133375RTL	DreamWear Full Face Mask Kit, Small
1133376RTL	DreamWear Full Face Mask Kit, Medium
1133377RTL	DreamWear Full Face Mask Kit, Large
1133378RTL	DreamWear Face Mask Kit, M. Cushion
1133430RTL	S, DREAMWEAR FULL CUSHION, RP-RTL
1133431RTL	M, DREAMWEAR FULL CUSHION, RP-RTL
1133432RTL	DreamWear Full Face Cushion, Large
1133433RTL	DreamWear Full Face Cushion, Medium

1137955	Combo LabPK DreamWisp
1137964	DreamWisp HEADGEAR, RP
1137965	DreamWisp LARGE HEADGEAR, RP
1137966	DreamWisp RS HEADGEAR, RP
1139332	P, DreamWisp Nsl, S-M Con, W/HGR KR
1139333	S, DreamWisp Nsl, S-M Con, W/HGR KR
1139334	M, DreamWisp Nsl, S-M Con, W/HGR KR
1139335	L, DreamWisp Nsl, S-M Con, W/HGR KR
1139336	XL, DreamWisp Nsl, S-M Con, W/HGR KR
1144344	DreamWisp RS HEADGEAR-Lab, RP
1144345	DreamWisp LARGE HEADGEAR-Lab, RP
1144346	DreamWisp HEADGEAR - Lab, RP
1144502	FitPack, DreamWisp, USA
1148409	DreamWisp Headgear (RS)- RTL
1148410	DreamWisp HEADGEAR, RP- RTL
1148411	DreamWisp LARGE HEADGEAR, RP- RTL
1148913	P, DreamWisp Nsl, S-M Con, W/HGR CN
1148914	S, DreamWisp Nsl, S-M Con, W/HGR CN
1148915	M, DreamWisp Nsl, S-M Con, W/HGR CN
1148916	L, DreamWisp Nsl, S-M Con, W/HGR CN
1148917	XL, DreamWisp Nsl, S-M Con, W/HGR CN
1137942AP	P, DREAMWISP NSL, MED CON, W/HGR, AP
1137942CE	P, DREAMWISP NSL, MED CON, W/HGR, CE
1137942RC	P, DREAMWISP NSL, MED CON, W/HGR, RC
1137943AP	S, DREAMWISP NSL, MED CON, W/HGR, AP
1137943CE	S, DREAMWISP NSL, MED CON, W/HGR, CE
1137943RC	S, DREAMWISP NSL, MED CON, W/HGR, RC
1137944AP	M, DREAMWISP NSL, MED CON, W/HGR, AP
1137944CE	M, DREAMWISP NSL, MED CON, W/HGR, CE
1137944RC	M, DREAMWISP NSL, MED CON, W/HGR, RC
1137945AP	L, DREAMWISP NSL, MED CON, W/HGR, AP
1137945CE	L, DREAMWISP NSL, MED CON, W/HGR, CE
1137945RC	L, DREAMWISP NSL, MED CON, W/HGR, RC
1137946AP	XL, DREAMWISP NSL, MED CON, W/HGR, AP
1137946CE	XL, DREAMWISP NSL, MED CON, W/HGR, CE
1137946RC	XL, DREAMWISP NSL, MED CON, W/HGR, RC
1137916RTL	FITPK DREAMWISP NSL, MED CON W/HGR -RTL